

Deep Well Plates

深孔板系列

产品升级

Upgrading

NEST[®]

Introduction


商品介绍

NEST深孔板的长、宽均符合SBS国际规范，在普通微孔板（主要为96、384孔）的外观尺寸基础上，增加孔深度，使得每个孔容积增大。同时，为增加NEST深孔板的使用范围，我们对制造原材料进行了升级，改进了表面处理工艺，并增加了产品规格，为您提供符合全自动工作站及其他实验需求的优质深孔板。

Usages and application directions of product

产品用途及应用方向

用途 Usage

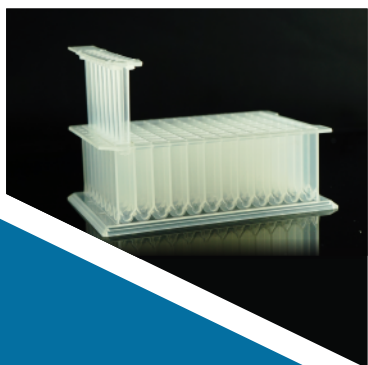

储存样品：

可替代常规的1.5mL离心管储存样品，具有储存时摆放整洁、节省空间、储存量大等优点。NEST深孔板可耐受-80℃低温，故又被叫做储存板。



处理样品：

可结合排枪、高通量自动液体操作仪器，实现对样品的高通量操作，如沉淀蛋白、液体萃取、核酸提取等，大大提高样品处理的效率。



进样操作：

适配各公司自动化设备，可成倍在自动设备样品仓中直接摆放进样，省去多次摆放样品等繁琐的工作。

应用方向 Application directions

可实现高通量自动化操作，可用于基因组DNA提取、质粒DNA提取，以及动物组织、细菌、植物、土壤、临床样品、酵母等各种样品的核酸提取、纯化等实验。

Product Features

产品特点

- 进口聚丙烯 (PP) 原材料, 符合USP Class-6标准, 化学性能稳定
- 可耐受121°C、20psi高温高压灭菌, 最大冷冻至-80°C
- 残留液少, 挂壁现象少
- 产品符合ANSI-SBS标准, 适配多道移液器及自动化设备
- 96孔方孔2.2mL、圆孔2.0mL可用于磁珠试剂盒, 适用于多个厂家的核酸提取仪
- 平整度好, 可用不干胶、硅胶或热封膜进行密封, 热封膜密封后可长距离运输
- 孔间均一性高, 可堆叠, 字母切角标记, 更易标识和读取
- 无DNA/RNA酶, 无热源, 重金属含量低

96-well I-shaped deep well plate + 8-Well Plastic Comb may be used with these instrument brands:

96孔工字型深孔板 + 8联排磁棒套适配仪器



天隆核酸提取仪

TIANLONG Nucleic Acid Extraction System



TAN bead核酸提取仪


TAN bead Nucleic Acid Extraction System

Product Information


产品信息



504102

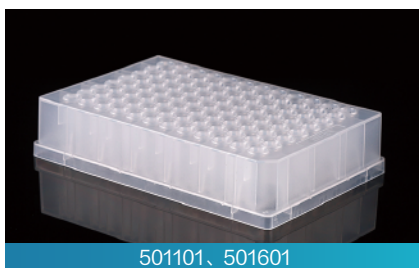

501101、501601

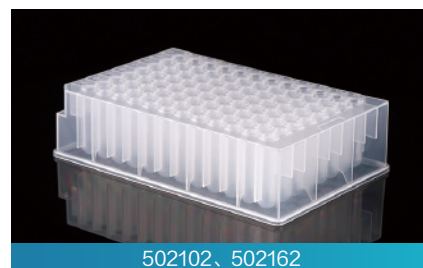

502102、502162



503102、503162




507001、507101

● 深孔板，圆孔

产品编号	描述	是否灭菌	包装规格
504102	3.5 mL 48孔, U型底	可定制	5块/包, 10包/箱
500101	0.36 mL 96孔, V型底	否	10块/包, 5包/箱
501102	0.4 mL 96孔, U型底	是	10块/包, 5包/箱
501101	0.5 mL 96孔, V型底	否	10块/包, 5包/箱
501601	0.5 mL 96孔, V型底	是	5块/包, 10包/箱
502102	1.0 mL 96孔, U型底, 半高型设计	否	5块/包, 10包/箱
502162	1.0 mL 96孔, U型底, 半高型设计	是	5块/包, 10包/箱
507001	1.3 mL 96孔, U型底	否	5块/包, 10包/箱
507101	1.3 mL 96孔, U型底	是	5块/包, 10包/箱
503102	2.0 mL 96孔, U型底	否	5块/包, 10包/箱
503162	2.0 mL 96孔, U型底	是	5块/包, 10包/箱



509211、509261

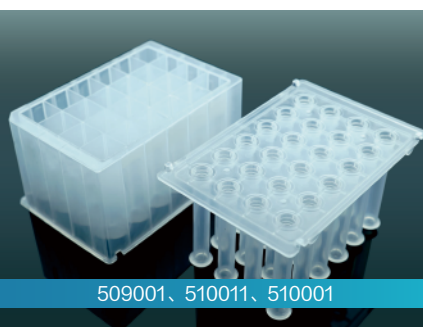

509001、510011、510001




503361、503311

● 磁棒套

产品编号	描述	是否灭菌	包装规格
509001	24孔磁棒套, 透明, 方孔	是	1个/包, 25包/箱
509211(NEW)	8连排磁棒套 (圆底)	否	2个/包, 50个/盒, 500个/箱
509261(NEW)	8连排磁棒套 (圆底)	是	2个/包, 50个/盒, 500个/箱
503361	MagPure 96磁棒套, 适配 KingFisher Flex&Presto	是	2个/包, 25袋/盒, 50个/箱
503311	MagPure 96磁棒套, 适配 KingFisher Flex&Presto	否	2个/包, 25袋/盒, 50个/箱

Product Information

产品信息

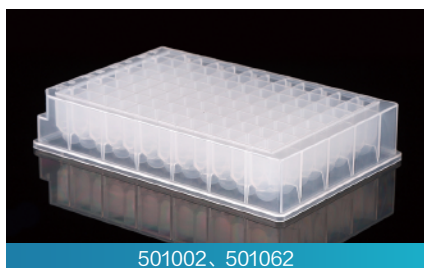

501002、501062



503001、503501



503002、503062



503021、503621



504002、504062




503711、503761

● 深孔板，方孔

产品编号	描述	是否灭菌	包装规格
504002	4.6 mL 48孔, U型底	是	5块/包, 10包/箱
504062	4.6 mL 48孔, U型底	否	5块/包, 10包/箱
501002	1.0 mL 96孔, U型底	否	5块/包, 10包/箱
501062	1.0 mL 96孔, U型底	是	5块/包, 10包/箱
502002	1.6 mL 96孔, U型底	可定制	5块/包, 10包/箱
503001	2.0 mL 96孔, V型底	否	5块/包, 10包/箱
503501	2.0 mL 96孔, V型底	是	5块/包, 10包/箱
503002	2.2 mL 96孔, U型底	否	5块/包, 10包/箱
503062	2.2 mL 96孔, U型底	是	5块/包, 10包/箱
503711(NEW)	2.2 mL, 96孔工字型方孔, U型底	否	5块/包, 10包/箱
503761(NEW)	2.2 mL, 96孔工字型方孔, U型底	是	5块/包, 10包/箱
510011	16 mL, 24孔深孔板+磁棒套, V型底	可定制	1个/包, 25包/箱
510001	16 mL, 24孔深孔板, V型底	是	1个/包, 25包/箱
503621	MagPure 2.2 mL, 96孔深孔板, V型底, 适配 KingFisher Flex&Presto	是	5块/包, 10包/箱
503021	MagPure 2.2 mL, 96孔深孔板, V型底, 适配 KingFisher Flex&Presto	否	5块/包, 10包/箱
500621	MagPure 0.5 mL 96孔深孔板, V型底, 适配 KingFisher Flex&Presto	是	5块/包, 10包/箱
500021	MagPure 0.5 mL 96孔深孔板, V型底, 适配 KingFisher Flex&Presto	否	5块/包, 10包/箱

● 96孔硅胶

产品编号	规格(孔)	孔型	适用产品	块/包	包/箱
506003	96	方孔	通用主流96孔方孔板	10	5
506004	96	方孔	通用主流96孔方孔板, 可穿刺(方便液体吸取)	10	5
506005	96	圆孔	通用主流1.0 mL及以下96孔圆孔板, 可穿刺(方便液体吸取)	10	5
506006	96	圆孔	适用于NEST 503102, 可穿刺(方便液体吸取)	10	5

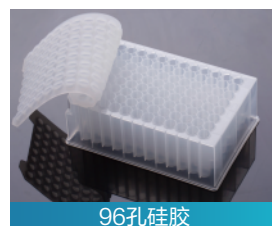

96孔硅胶