


NEST®



离心管密闭系统

Closed System of Centrifuge Tube

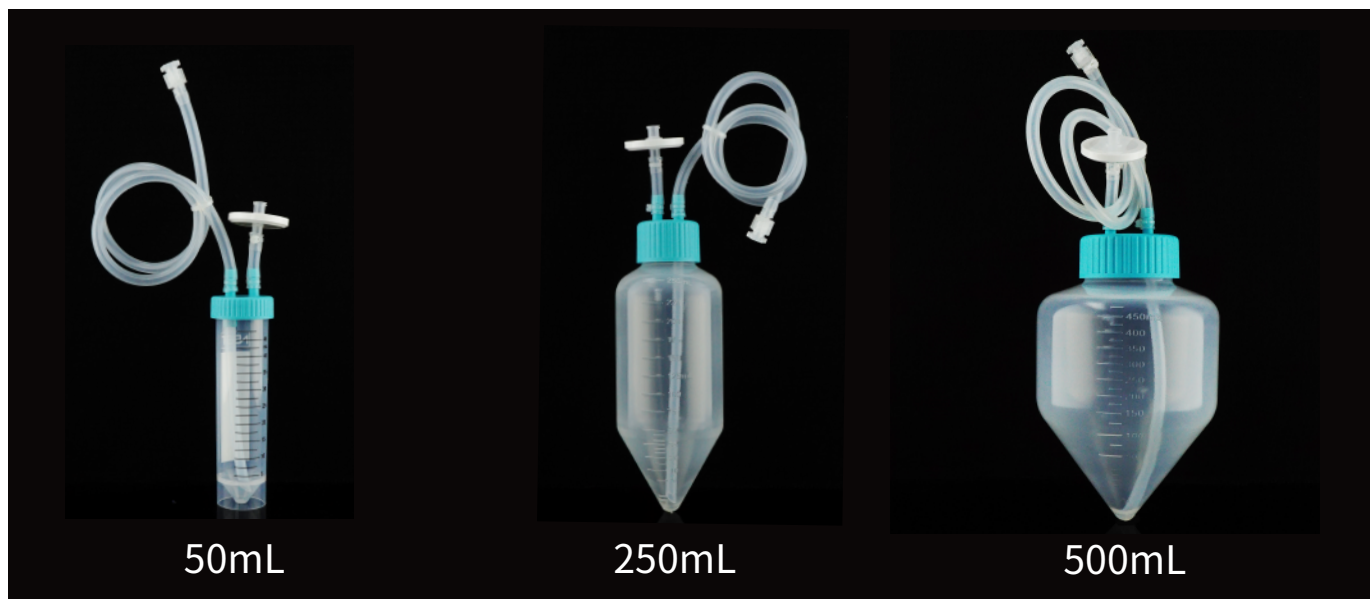

■ 产品介绍

预组装的离心管密闭系统,应用于生物制品的取样,无菌转移等生产环节,每个密闭系统都采用双层包装,并配备一个普通盖子,取样后可将带管路盖子更换为普通盖子,进行后续离心、分析操作。

用于组织和细胞培养、实验室研究、疫苗生产等产品无菌取样和转移,主要面对生物医疗行业生物制药、疫苗生产等工业客户群体,能减少组装时间,节省取样时间,降低使用成本。

■ 产品特点及应用

- 预组装好的产品可即拿即用,密闭式的液体转移,避免了开放式操作,降低了液体转移过程中污染的风险,免除一系列清洁验证;
- 管路材质符合工业制药企业要求,并在端口连接鲁尔公接头,可防止意外断开,同时鲁尔接头提高了使用的便捷性;
- 双层无菌包装,适用于GMP生产;
- 管路可根据需要进行定制。

编号	名称	包装	备注
C60622-EFB050A	50mL 离心管密闭系统	1个/包,4个/箱	进出液管路1/8"(3.2mm) ID, 1/4" (6.4mm) OD, 管路长度50cm; 滤膜直径24mm, 孔径0.2μm; 液体转移管路末端连接鲁尔公接头,并带有鲁尔帽。
C60922-EFB050A	250mL 离心管密闭系统	1个/包,4个/箱	
C61022-EFB050A	500mL 离心管密闭系统	1个/包,4个/箱	